

MEDTRUM S7 EASYSENSE

LINUS MEDICAL OÜ

Anna Nukka
Tootejuht
Linus Medical OÜ

LINUS MEDICAL OÜ

Linus Medical tegutseb kõigis kolmes Balti riigis ning tegeleb meditsiiniseadmete müügi, hulgimüügi ja turundamisega Balti regioonis.

KAUBAMÄRGID



77 ELEKTRONIKA




- Medismart Sapphire plus
- Medismart Ruby
- Medismart lantsetid



DIABEET

Autosense Voice

- Autosense Voice rääkiv glükomeeter

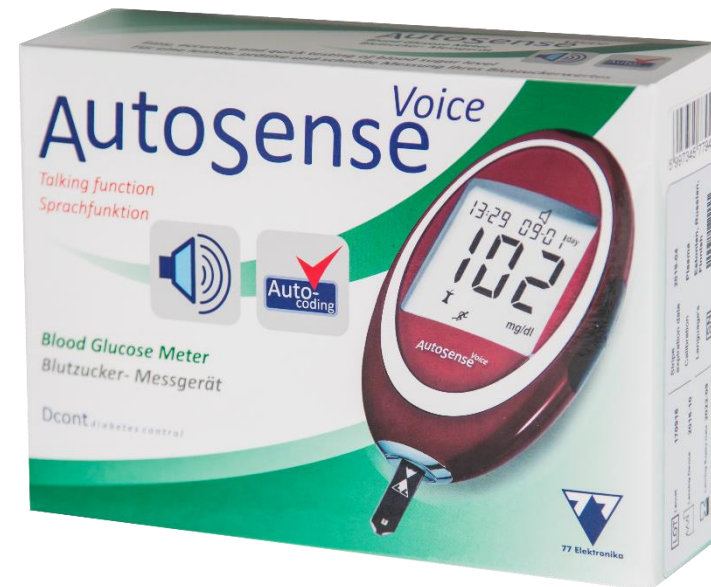

DIABEET

Feel Fine insuliininõelad


- Feel Fine 8 mm 31G N100
- Feel Fine 6 mm 31G N100
- Feel Fine 5 mm 31G N100
- Feel Fine 4 mm 32G N100



DIABEET

Medtrum

- S7 CGM – pideva glükoosinäidu jälgimise süsteem

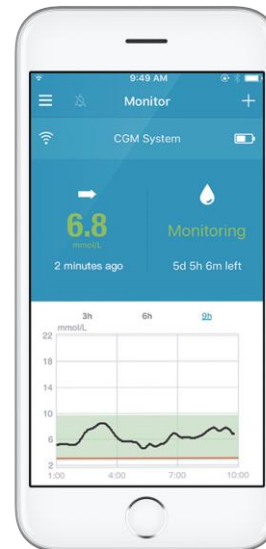

MEDTRUM S7-CGM

Medtrum - S7 CGM – pideva glükoosinäidu jälgimise süsteem

Lisainformatsioon: www.cgm.ee

Tellimine: www.veresuhkur.ee

FB: [S7 CGM-süsteem – pidev glükoosinäidu jälgimine](#)

MEDTRUM S7-CGM

Leistungsbewertung eines 14-Tage Echtzeit-Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung

Medtrum S7 EasySense® CGM System

MARD (mean absolute relative difference) liegt beim S7 EasySense® bei **9.7%** Abweichung von den Laborwerten.


Abweichung	D (ml/dL)	RD (%)	AD (mg / dL)	ARD (%)
Mean	1.2	2.1	13.9	9.7
Median	1.0	1.0	11.0	7.7
SD	18.9	13.8	12.8	8.3
SE	0.2	0.1	0.1	0.1
95% CI L	0.9	1.9	13.7	9.6
95% CI U	1.5	2.3	14.1	9.9

Abb. 2: Die MARD des S7 EasySense® liegt bei 9.7%.

MEDTRUM S7-CGM

Leistungsbewertung eines 14-Tage Echtzeit-Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung


Medtrum S7 EasySense® CGM System

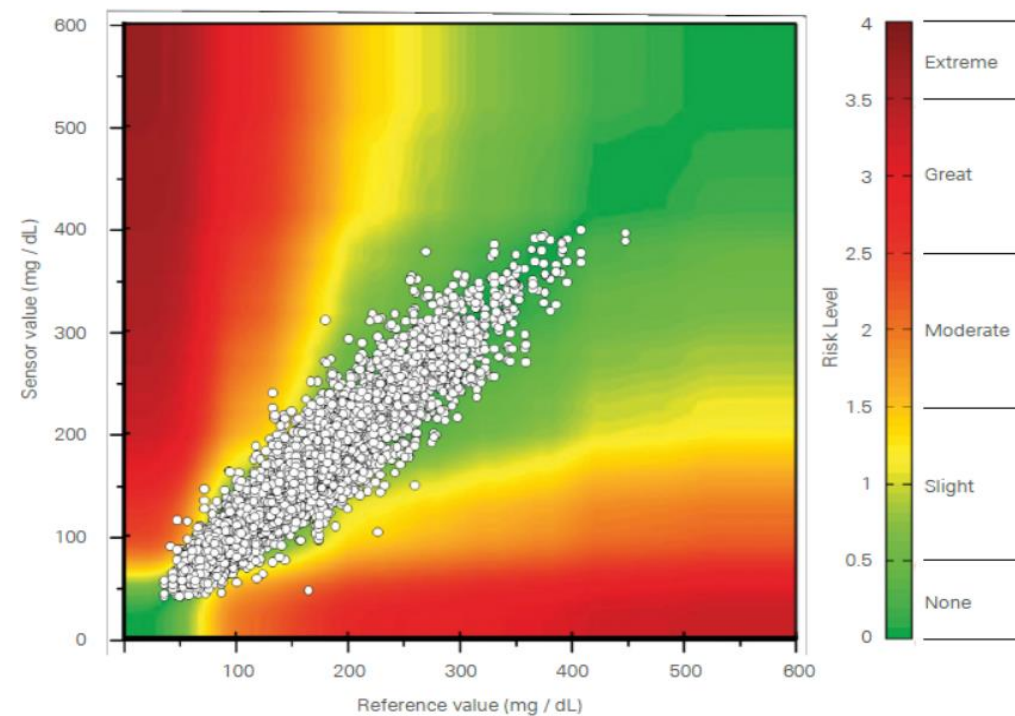

MEDTRUM S7-CGM

Medtrum S7

- Sensori tööaeg **kuni** 14 päeva
- Transmitteri tööaeg 3 kuud

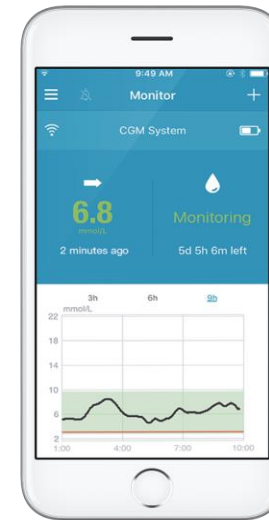

MEDTRUM S7-CGM

	Android	iPhone	iPad	Apple Watch	Windows	Mac
Patient	A6 TouchCare System: EasyTouch App Stand-alone CGM: EasySense App Compatible devices: LG Google Nexus 5, LG G4, LG G5, SonyXperia Z5, Honor 8, Huawei P9, Huawei P10, Huawei P20, Huawei P30 Pro, MI 5X, Samsung Galaxy S6 Active, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy J3, Galaxy J5, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9, Samsung Galaxy S10, Galaxy A9 Supported operating systems: Android 4.3 and above	A6 TouchCare System: EasyTouch App Stand-alone CGM: EasySense App Compatible devices: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPod touch 5th Gen iPhone 8, iPhone XR Supported operating systems: iOS 8.0 and above	A6 TouchCare System: EasyTouch App Stand-alone CGM: EasySense App Compatible devices: iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad	EasyTouch App, EasySense App, EasyFollow App Compatible devices: iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 plus iPhone 8, iPhone XR Apple watch: Watch series 1, Watch series 2, Watch series 3. Supported operating systems: iOS 11.0 and above, Watch OS 4.0 and above	EasyView personal website: https://easyview.medtrum.eu OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Browser: Google Chrome 61.0 and above, Firefox 56.0.2 and above, IE 11 and above, Microsoft Edge 41 and above	EasyView personal website: https://easyview.medtrum.eu OS: Mac OS 10.10.5 and above Browser: Safari 8.0.8 and above
Caregiver	EasyFollow App Compatible devices: LG Google Nexus 5, LG G4, LG G5, SonyXperia Z5, Honor 8, Huawei P9, Huawei P10, Huawei P20, Huawei P30 Pro, MI 5X, Samsung Galaxy S6 Active, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy J3, Galaxy J5, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9, Samsung Galaxy S10, Galaxy A9 Supported operating systems: Android 4.3 and above	EasyFollow App Compatible devices: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPod touch 5th Gen iPhone 8, iPhone XR Supported operating systems: iOS 8.0 and above	EasyFollow App Compatible devices: iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad		EasyView personal website: https://easyview.medtrum.eu OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Browser: Google Chrome 61.0 and above, Firefox 56.0.2 and above, IE 11 and above, Microsoft Edge 41 and above	EasyView personal website: https://easyview.medtrum.eu OS: Mac OS 10.10.5 and above Browser: Safari 8.0.8 and above
HCP			EasyView iPad App Compatible devices: iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad	EasyView Pro website: www.easyviewpro.com OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Browser: Google Chrome 61.0 and above, Firefox 56.0.2 and above, IE 11 and above, Microsoft Edge 41 and above		EasyView Pro website: www.easyviewpro.com OS: Mac OS 10.10.5 and above Browser: Safari 8.0.8 and above

MEDTRUM S7-CGM

Kasutamine:

1. Laadige alla tasuta äpp
2. Registreerige kasutades oma e-posti, looge parool
3. QR koodi abil registreerige saatja (koodi saab sisestada ka käsitsi)
4. Valige sensorile sobilik koht ning paigaldage sensor
5. Kinnitage saatja sensorile
6. Oodake 2 tundi, kuni sensor „soojeneb“
7. Kalibreerige sensor mõõtes veresuhkrut glükomeetriga ning sisestage tulemus äppi
8. Uue sensori paigaldamise päeval kalibreerige 2 korda ööpäevas, edaspidi 1 kord

MEDTRUM S7-CGM

Äpp
Google play ja
App Store


Medtrum EasySense –
- sensori kandja jaoks



Medtrum EasySense mmol/L
MEDTRUM TECHNOLOGIES Inc.
✓ Installitud



Medtrum EasyFollow mmol/L
MEDTRUM TECHNOLOGIES Inc.
✓ Installitud

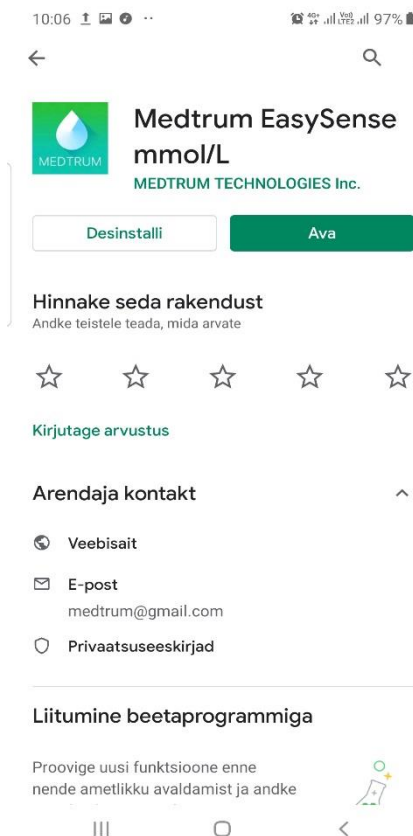

MEDTRUM S7-CGM

Äpp
Google play ja
App Store


Medtrum EasyFollow –
- jälgija jaoks



Medtrum EasySense mmol/L
MEDTRUM TECHNOLOGIES Inc.
✔ Installitud



Medtrum EasyFollow mmol/L
MEDTRUM TECHNOLOGIES Inc.
✔ Installitud

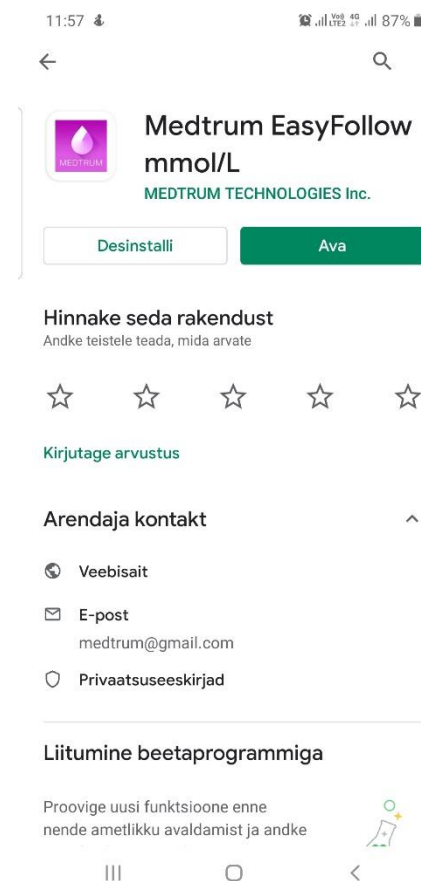


MEDTRUM S7-CGM

Sensori paigaldamise parimad kohad (varjutatuna)

Sensorile asukoha valimisel pidage silmas, et:

- sensor peab jääma mugavalt ligipääsetavaks,
- sensor peab paigaldama sirgele nahapinnale, kus on piisavalt nahaalust rasva,
- see ala peab jääma sirgeks ka igapäevatoimingute juures, ilma paindumata ja kortsu minemata

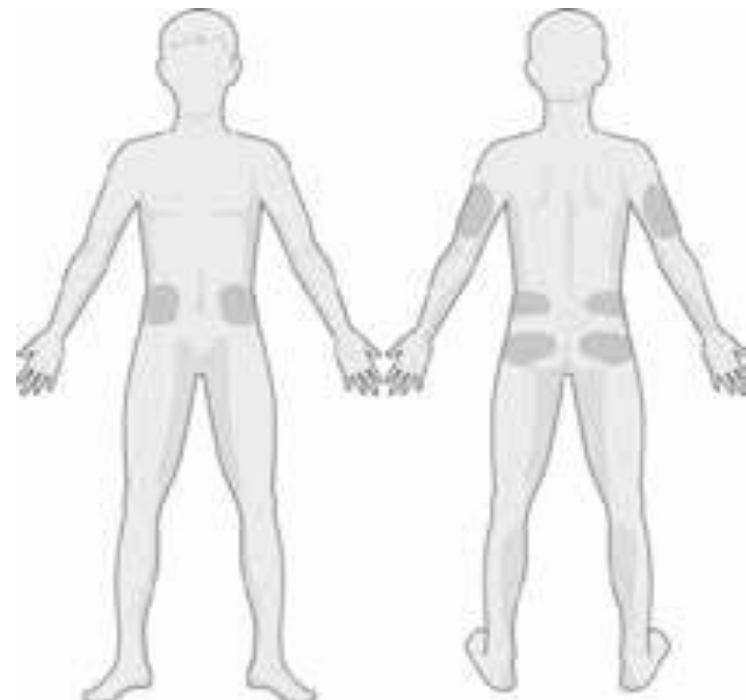

MEDTRUM S7-CGM

Sensor




Transmitter



Glucose Sensor




Safety Lock

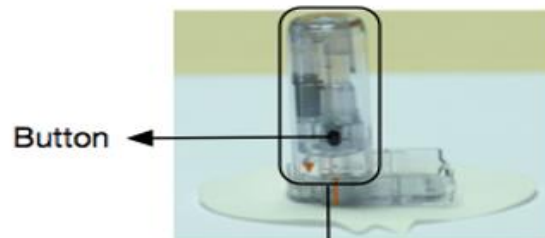

Inserter




Ribbed Release Tab

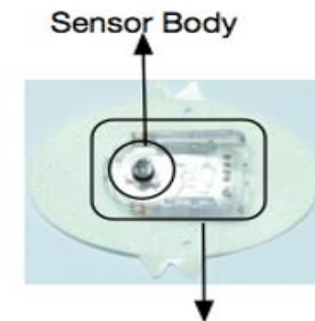

Sensor Support Mount

MEDTRUM S7-CGM

Andmete edastamine

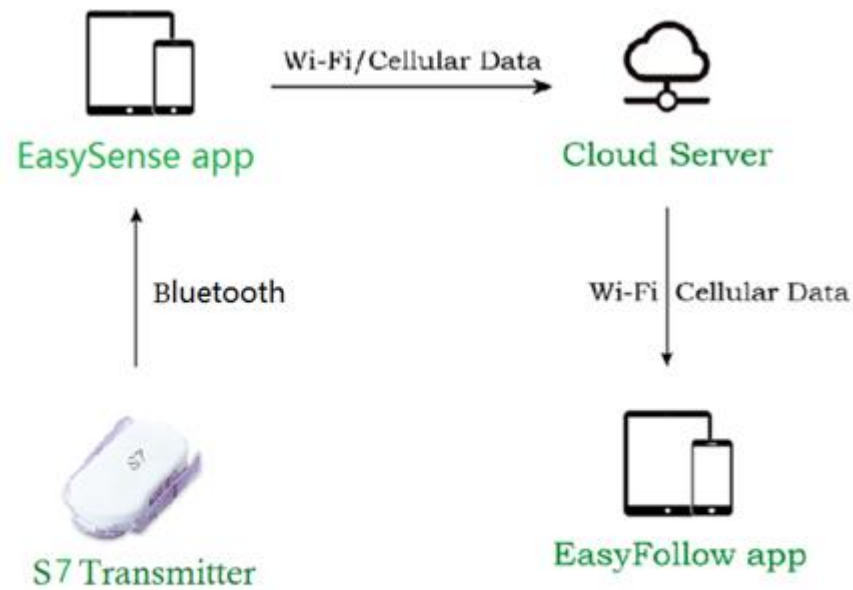

MEDTRUM S7-CGM

Andmete analüüs

easyview.medtrum.eu

MEDTRUM S7-CGM



MEDTRUM S7-CGM

- Näidustatud alates 2. eluaastast
- 720 mõõtmist ööpäevas
- Veekindel (60 min. 2,5 m sügavusel)
- Valuvaba paigutus ning väike ökoloogiline jälg
- EasySense® ja EasyFollow® rakendused
- Trendi nooled glükoositaseme hõlpsamaks tõlgendamiseks
- Eelhäired kõrge ja madala glükoositaseme saavutamisest (reguleeritav vahemikus 5–30 minutit)
- EasyView® veebiportaal pakub kõikehõlmavat informatsiooni patsiendi seisundist

MEDTRUM S7-CGM

Lisainformatsioon

- www.cgm.ee (kasutusjuhendid, õppevideod, KKK)
- www.veresuhkur.ee (tellimine, hinnad)
- cgmEE@linusmedical.com
- anna.nukka@linusmedical.com, tel. 515 4953